



# The Rio Intense Pulsed Light Hair Remover IPL Pro IPHR2






Rio Intense Pulsed Light Hair Remover Pro



target underarm & arm hairs



gets rid of leg hairs

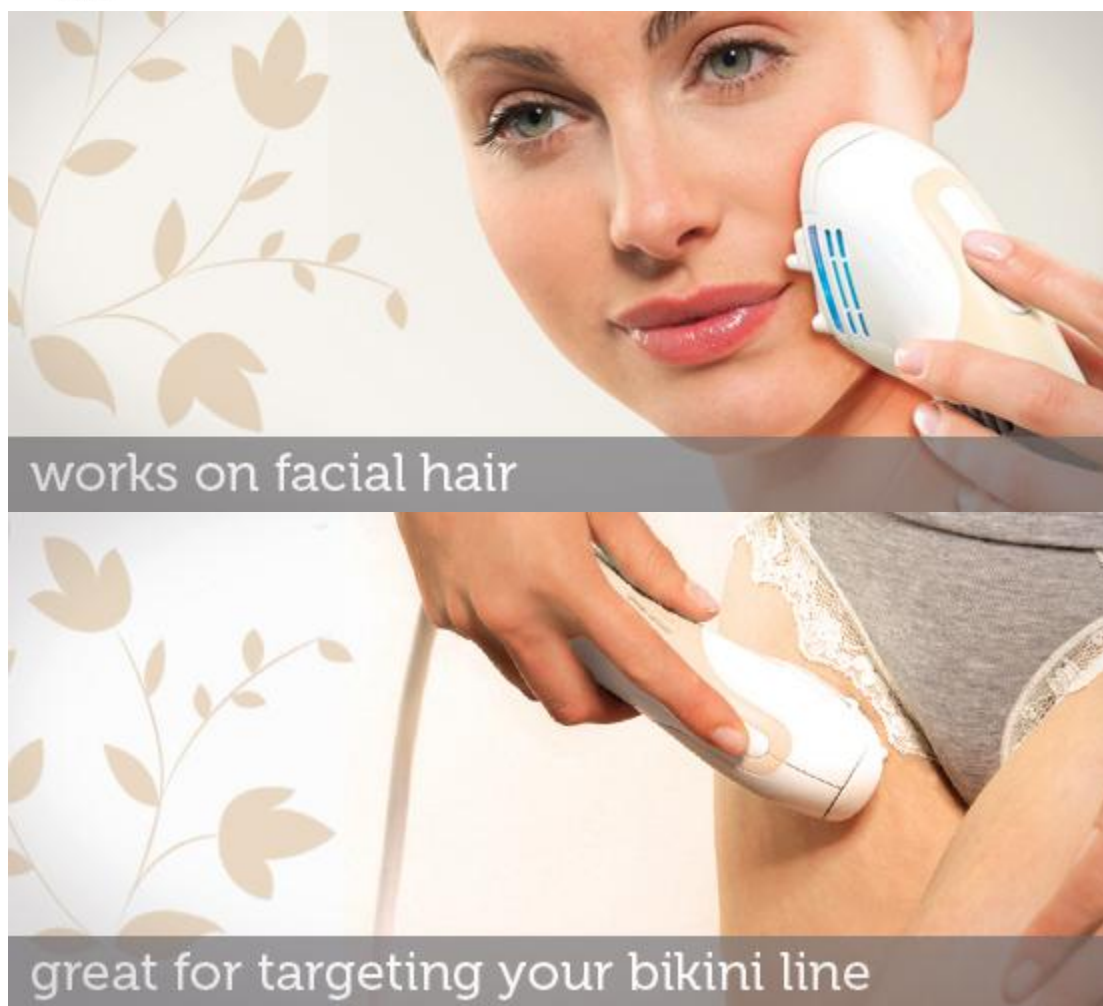

33% meer vermogen en 20% sneller dan de Rio Intense Pulsed Light Hair Remover voor verbeterde werking

Lange levensduur vervangbare lamp met +40,000 flitsen\*\*



## DE RIO INTENSE PULSED LIGHT HAIR REMOVER

De Rio Intense Pulsed Light Hair Remover gebruikt de laatste Intense Pulsed Light (IPL) technologie. Zachtjes tegen de huid gedrukt, worden flitsen van intens light direct naar de haar follikels gestuurd, met genoeg energie om de wortel te vernietigen zonder het aangelegen gebied aan te tasten. IPL geeft snelle en efficiënte permanente haarvermindering en is geschikt voor grotere gebieden zoals benen, armen, oksels, bikinilijn, rug, borst en bepaalde gebieden van het gezicht.

De Intense Pulsed Light Hair Remover kan veilig binnen de weergegeven stippellijn op het gezicht worden gebruikt.

**Belangrijk:** Het mag niet gebruikt worden rond de ogen of op de lippen.

### GESCHIKTE HUIDTYPEN

Niet geschikt voor gebruinde of donkere huidsteinten, zoals bijvoorbeeld Afro-Carribsch, Donker Afrikaans, Indiaas of Pakistaanse afkomst. Zelfs als je huid geschikt lijkt te zijn op de huidskleurenkaart, niet gebruiken als nauwe verwanten (ouders/grootouders) huidtinten hebben zoals boven beschreven. Niet geschikt voor rood, light blond, grijs of wit haar.

**BELANGRIJK:** Niet voor gebruik bij of door kinderen jonger dan 14 jaar oud. Niet voor gebruikt bij of door kinderen tussen 14 en 17 jaar zonder ouderlijk toezicht.



approved for home use



destroys hair root



security key



large treatment area



intense pulsed light



treats up to 180 hairs

### SKIN TONE CHART







## HOE TE GEBRUIKEN

Het is belangrijk 24 uur voor behandeling een test te doen op een klein gebied. De test zal de maximum sterkte voor jouw huid type bevestigen.

Als je klaar bent om te beginnen, moet het te behandelen gebied geschoren worden. Dit om te verzekeren dat de light energie direct de haarwortel bereikt en voorkomt het verbranden van haar op de oppervlakte.

Zet het apparaat aan, voer de beveiligingscode in, druk de startknop in en plaats het apparaat op het gebied welke je wenst te behandelen. Zorg ervoor dat de huid sensoren in contact zijn met de huid, druk de behandelingsknop in en houdt vast, dit initieert de behandelingsflits.

Na de behandelingsflits zal het apparaat een controle doen. Verplaats het apparaat naar het volgende te behandelen gebied en herhaal de handeling. Als je klaar bent met de behandeling kun je het apparaat uitzetten en opbergen op een veilige plaats, buiten bereik van kinderen.

Het tijdstip van de vervolgbehandeling is niet kritisch. We raden aan om een periode van 2 weken tussen behandelingen aan te houden, hoewel sommige mensen het gebied iedere week behandelen en andere slechts een keer per maand. Dit is afhankelijk van persoonlijke voorkeur en wat het te behandelen gebied is. Zolang de haar follikel of omliggende huid niet rood, pijnlijk of branderig is, kan de behandeling na minimaal 48 uur herhaald worden.





## **VEELGESTELDE VRAGEN OVER IPL HAAR VERWIJDERING**

### **Hoe moet ik mijn huid voorbereiden voor IPL haar verwijdering?**

Zorg ervoor dat de huid schoon is. IPL haar verwijdering is het meest effectief op een bleke huid. Zonnebaden, het gebruik van zonnebanken en bruiningsmiddelen mogen drie weken voor de start van de behandeling NIET ondernomen worden.

### **Hoe moet ik de haren voorbereiden voor IPL haar verwijdering?**

Scheer het te behandelen gebied. Het minimaliseren van de lengte van de haren zorgt ervoor dat de licht energie direct bij de haarwortels terecht komt en voorkomt het verbranden van haar op de huidoppervlakte.

### **Welke gebieden kan ik behandelen?**

Het meeste lichaamshaar kan verwijderd worden middels IPL - de meest voorkomende oppervlakten zijn oksels, armen, borst, rug en bikinilijn en bepaalde gedeeltes van het gezicht.

### **Hoe voelt het?**

De meeste mensen ervaren een verwarming van de huid. Een lichte irritatie vergelijkbaar met dat van een kleine zonverbranding kan gevoeld worden indien gebruikt met een te hoog vermogen, of wanneer het gebied niet is geschoren. Mannen die deze behandeling ondergaan ervaren een groter ongemak omdat lichaamshaar bij mannen over het algemeen dikker is dan bij vrouwen. Dit gevoel verdwijnt snel.

### **Kan ik IPL haar verwijdering gebruiken op gevoelige huid?**

Ja, de IPL reageert met haar, dus de omliggende huid wordt niet aangetast

### **Hoe zit mijn huid eruit na de behandeling?**

Over het algemeen zullen er geen merkbare veranderingen zichtbaar zijn. Een lichte roodheid na behandeling kan voorkomen, maar dit zal normaal gesproken binnen 24 uur vervagen. Enige gelokaliseerde roodheid na behandeling is veroorzaakt door de vernietiging van haar follikels en is normaal. Mocht er na 24 uur nog roodheid of ontsteking zichtbaar zijn geeft dit aan dat je een te hoog vermogen voor het huidtype is gebruikt. Raadpleeg de "Test" sectie.

### **Is er iets wat vermeden moet worden na IPL haar verwijdering?**

Blootstelling aan de zon of bruining zou minstens voor 48 uur vermeden moeten worden. Zorg ervoor dat natuurlijke of kunstmatige bruining volledig vervaagd is voordat er verdere behandelingen uitgevoerd worden. Als de huid wordt blootgesteld, gebruik dan een zonnebrandcrème. Voorkom tevens het gebruik van schurende reinigingsmiddelen of huidpeeling behandelingen. Vermijdt zwemmen in gechloreerd water of het gebruik van een het bad voor 48 uur. Het chloor in het water kan een jeukerig gevoel als resultaat hebben.



### **Hoe vaak kan ik de IPL haar verwijderingsbehandeling herhalen?**

De tussenpozen tussen de behandelingen is niet kritisch. We raden aan 2 weken tussen behandelingen aan te houden, hoewel sommige personen het te behandelen gebied iedere week wensen te behandelen en andere slechts een keer per maand. Dit is afhankelijk van persoonlijke voorkeur en wat het te behandelen gebied is. Zo lang de haar follikel of omliggende huid niet rood, pijnlijk of branderig is, kan behandeling na een minimum van 48 uur worden herhaald. Dit geeft de tijd om te zien welke haren zijn uitgevallen en om hergroei te identificeren. Kies een tijd welke gunstig is voor jezelf. Voorkom overmatig behandelen op dezelfde regio in een keer. Dit kan leiden tot roodheid en zwelling.

### **Is er een nazorg routine welke ik moet volgen?**

Indien u wenst, kunt u een ongeparfumeerde kalmerende lotion, een ice pack of natte handdoek op de behandelde gebieden plaatsen, maar we raden aan 24 uur geen zeep op het behandelde gebied te gebruiken. Zorg ervoor dat het behandelde gebied vooral schoon is voor 3 dagen. Wanneer u de oksels behandelt, voorkom het gebruik van een anti-transpirante deodorant voor 2-3 dagen. Voorkom voor 48 uur onnodige blootstelling aan de zon.

### **Wat is het verschil tussen IPS en een laser?**

Er zijn twee grote verschillen tussen Lasers en Intense Pulsed Light. Over het algemeen behandelt IPL een groter gebied dan het relatief kleine behandelingsgebied met Lasers en daarom zijn behandeling van grote gebieden veel sneller. Het andere verschil is de golflengte van het geproduceerde licht. Lasers produceren licht met een specifieke golflengte, terwijl IPL een groot spectrum van golflengtes gebruikt. Dit beperkt IPL tot specifieke huidtypes.

### **Hoeveel behandelingen heb ik nodig?**

IPL haar verwijdering is over het algemeen gezien effectief na 6 behandelingen over een periode van 6 maanden. Dit varieert per persoon en het te behandelen gebied, haar dichtheid, haar groei cyclus en kleur. Donkere haren op lichte huid reageert het beste, maar zowel donker als licht haar kan diverse behandelingen nodig hebben voor langdurig resultaat. Sommige individuen hebben meer behandelingen nodig, andere minder, om tevredenheid te bereiken. Aanvankelijk zal je een geleidelijke uitdunning/vermindering van haargroei waarnemen in het behandelde gebied. Vrouwen die last hebben van buitensporig haar groei dankzij mannelijk type hormonen hebben waarschijnlijk meer onderhoud op lange termijn nodig.

### **Kan ik andere haar verwijderings methoden gebruiken tussen behandelingen door?**

Omdat er bij IPL behandelingen haar in de follikel nodig heeft, zijn haar verwijderingsmethodes welke de haren plukken, zoals harsen, epilieren en pincetten NIET geschikt voor gebruik tussen behandelingen door. Het bleken van haren is ook NIET geschikt omdat het de pigment verwijderd en maakt het laseren ineffectief. Scheren, micro-dermabrasie en crème ontharingsmiddelen zijn ideaal voor gebruik tussen behandelingen door.



### **Hoe groot is het behandelingsgebied?**

35mm x 14mm

### **Waarom is het belangrijk om te scheren?**

Het is belangrijk dat ieder te behandelen gebied geschoren is zodat de licht energie direct naar de haarwortel gaat, voor het maximum effect. Dit voorkomt tevens het verbranden van haar op de huidoppervlakte, welke ongemakkelijk kan zijn.

### **Welke veiligheidsvoorzieningen heft het?**

De belangrijkste veiligheidsmaatregel regelt het vermogen, zodat het alleen kan worden verhoogd met 1 stap per behandeling, beginnend met niveau 1. Dit vermindert het risico om een te hoog vermogen te gebruiken. Het vermogen kan worden verlaagd in zoveel stappen als nodig.

Andere veiligheidsvoorzieningen zijn:

- Een sleutelslot
- Een veiligheidscode om misbruik te voorkomen
- Huid sensoren op de staf om te zorgen dat IPL behandeling alleen voorkomt wanneer een goed contact wordt gemaakt met de huid
- Een fel oranje 'knipper veiligheid' licht, welke knipper reactie zal veroorzaken als deze direct op het oog wordt gericht.
- Een UV filter in de IPL opening om het risico van schadelijk UV licht te voorkomen.
- Detectie van oververhitting

### **Zijn er bijwerkingen?**

Zoals met alle ontharingsmiddelen welke licht energie gebruiken, is er na gebruik kans op een lichte roodheid van de huid, of verlichting van de huid in flarden. Beide zouden binnen 24 uur moeten verdwijnen.

### **DOOS INHOUD:**

- Intense Pulsed Light Hair Remover apparaat en basis
- Instructie DVD
- Volledige instructies en handleiding
- Adapter